

Avance[®] Solo

Consideraciones a tener en cuenta si está recibiendo tratamiento con el sistema de terapia de presión negativa Avance[®] Solo



Avance[®] Solo
Guía del paciente


Mölnlycke[®]



Contenido

Introducción al sistema de Terapia de Presión Negativa (TPN)

Conozca la TPN y Avance® Solo

04-05

Cosas a tener en cuenta al usar Avance® Solo

Aprenda qué hacer y qué evitar al utilizar el sistema de terapia de presión negativa Avance® Solo

06-07

Cómo cuidar su sistema Avance® Solo

Información sobre cómo limpiar y cuidar su dispositivo médico y lo que significan las señales audiovisuales

08-11

Visite la **página web de Avance Solo** para toda la información sobre el producto, testimonios, casos clínicos y videos y guías de aplicación.



www.molnlycke.es/avancesolopaciente

Nota: Debe ponerse en contacto inmediatamente con su profesional de la salud si tiene algún problema. Esto incluye hemorragias, presión arterial elevada o problemas con el dispositivo. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su cuidador:


Nombre: _____

Tel: _____

Email: _____

Usted está recibiendo tratamiento con el Sistema de Terapia de Presión Negativa Avance® Solo de Mölnlycke®. Este folleto le informará sobre cómo usar y cuidar el dispositivo. Por favor, léalo con atención.

¿Cuáles son las diferentes partes de Avance® Solo?

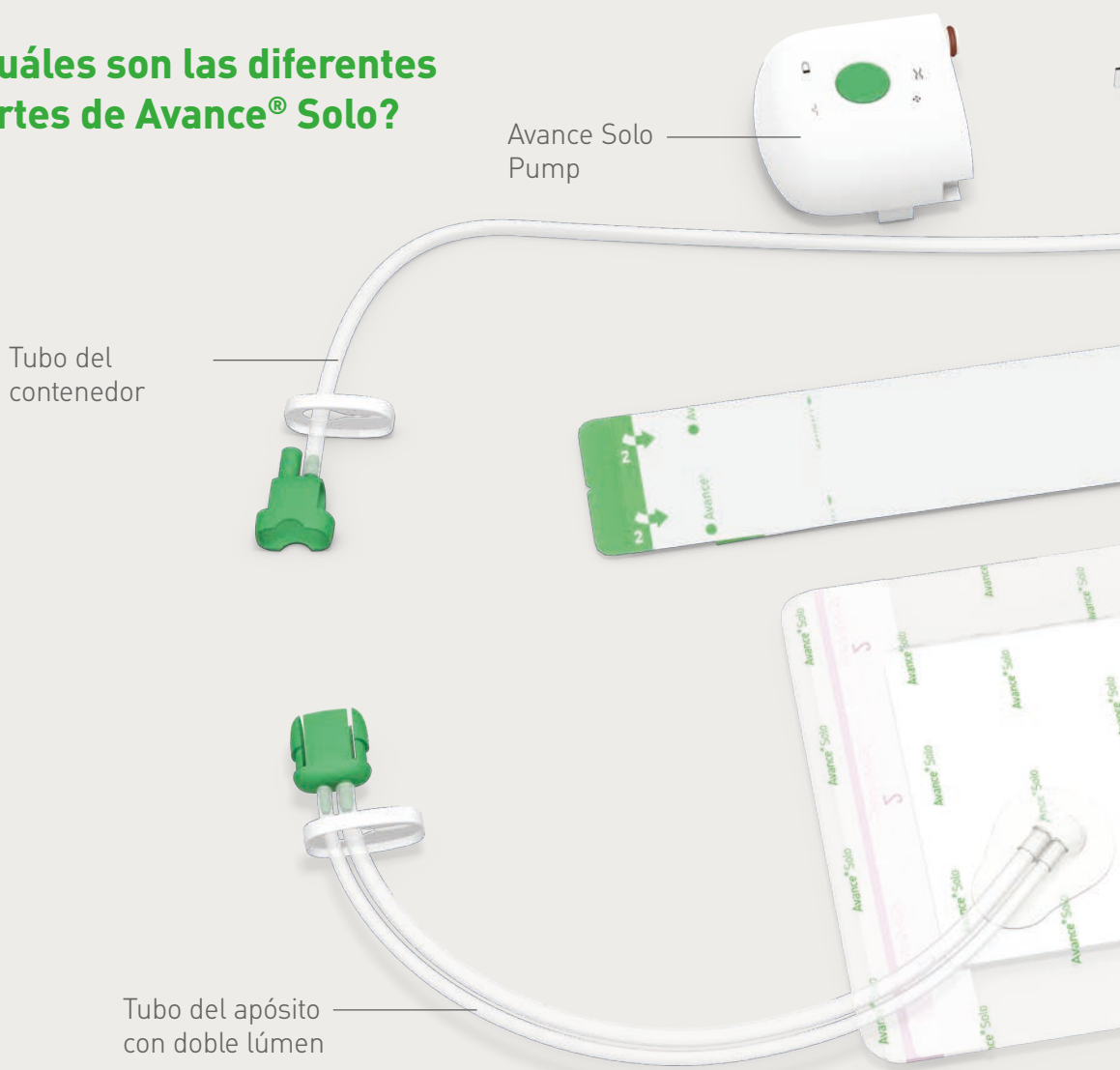

Avance Solo Pump

Tubo del contenedor

Tubo del apósito con doble lúmen

¿Qué es la Terapia de Presión Negativa (TPN) para el cuidado de heridas?

La Terapia de Presión Negativa (TPN) es un método de tratamiento de heridas mediante succión. El apósito es hermético y la bomba crea una presión subatmosférica, limpiando la herida de exudado y fluidos.

¿Cuáles son los beneficios de este sistema?

- Ayuda a la curación en heridas complejas y de lenta cicatrización¹
- Mejora la preparación del lecho de la herida para su cicatrización¹
- Ayuda a reducir la hinchazón y protege la herida de la contaminación externa²



Avance Solo Contenedor 50 ml



Tiras de fijación



Apósito Avance Solo con borde

Cosas a tener en cuenta al usar Avance® Solo

Avance® Solo es un dispositivo médico y es importante que lo cuide adecuadamente. La información que se muestra a continuación se ha extraído del manual de usuario para el paciente. Para obtener instrucciones completas, advertencias y precauciones, por favor revise el manual de usuario para el paciente, incluido en el embalaje del producto.

No se debe hacer:

- Cambiar los apósitos usted mismo
- Exponer a chorros de agua directa el dispositivo, contenedor, tubo o apósito
- Sumergir el apósito, la bomba, el contenedor o el tubo en agua
- Uso en un avión. Retirar las baterías durante los viajes en avión.
- Desmontar o manipular el dispositivo
- No permita que los niños o las mascotas tengan acceso al dispositivo

Características importantes:

- Asegúrese de que conoce las alarmas visuales y sonoras de fuga, bloqueo y batería baja de la bomba Avance Solo
- **El pulso regular de la bomba es la confirmación de que el sistema está funcionando y eliminando constantemente el exceso de fluido para mantener el nivel de presión deseado**
- Compruebe que el apósito está contraído y firme al tacto. Si no es así, consulte a un profesional de la salud.

Asegúrese de llevar y colocar el dispositivo de forma que se evite:

- Atrapamiento o estrangulamiento (es decir, tubos que se enrollan al rededor del cuerpo)
- Atar o bloquear los tubos
- Cuando usar el clip para el cinturón asegúrese de que esté colocado a ambos lados de su cintura. Si por comodidad o conveniencia, lo coloca al frente, retírelo antes de sentarse para evitar que la bomba sea empujada fuera del clip del cinturón.


Cómo manejar sus rutinas de higiene diaria

Usted puede darse duchas ligeras mientras recibe el tratamiento Avance Solo. Antes de hacerlo, es importante que siga los pasos que le indicamos a continuación, evitando en todo momento el contacto del agua con la bomba y contenedor, y procurando no aplicar el chorro de agua directa sobre el apósito. Siga la siguiente guía sobre cómo manejar su dispositivo correctamente durante las rutinas de higiene para evitar la contaminación.


Siga estos pasos al darse una ducha ligera:




1 Ponga en pausa la terapia pulsando el botón verde de inicio, y soltando después de dos (2) segundos.

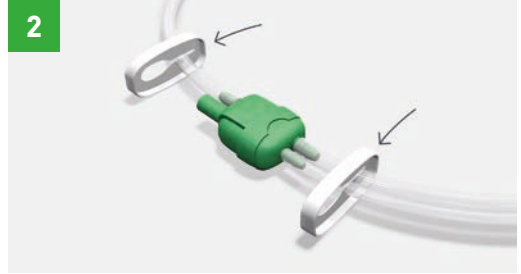


2 Sujete el tubo del contenedor y el tubo del apósito colocando las abrazaderas deslizantes junto a los conectores verdes y deslícelas a través de los tubos hasta que estén sellados.

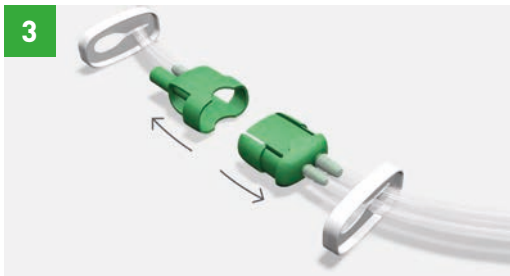

3 Desconecte el tubo del contenedor con la bomba del tubo del apósito y coloque la parte de la bomba a salvo de la ducha.

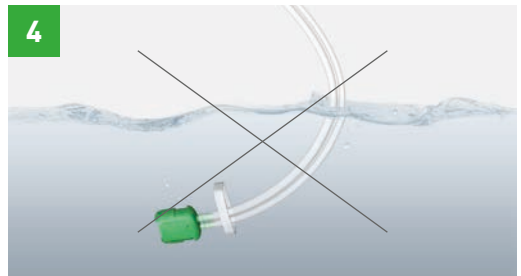

4 Asegúrese de que el tubo del apósito no se sumerja en agua cuando se duche.

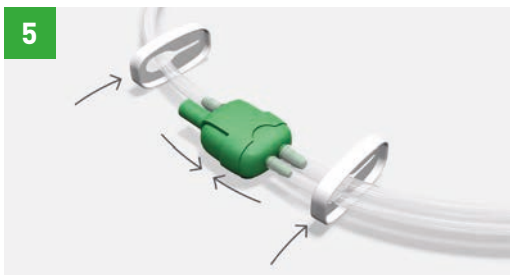

5 Después de la ducha, reconecte el apósito a la bomba y al contenedor con los conectores verdes. Una vez conectados, suelte las dos sujeciones.



6 Reinicie la terapia presionando el botón verde de inicio, y suéltelo después de dos (2) segundos, hasta que la bomba se active y el botón parpadee.


Cómo cuidar de su Avance® Solo

Cambiar el contenedor

Puede ver si el contenedor debe ser cambiado a través de la ventana transparente en su parte posterior, o si hay una alarma de bloqueo de la bomba. Para sustituir el contenedor, por favor siga los pasos que se indican a continuación. Siempre que sea posible, ensaye el proceso de sustitución del contenedor junto a su profesional sanitario al recibir Avance® Solo.




1 Detenga la bomba presionando el botón verde de arranque y suéltelo después de dos (2) segundos. La bomba emitirá dos pitidos para confirmar que está en modo de pausa.

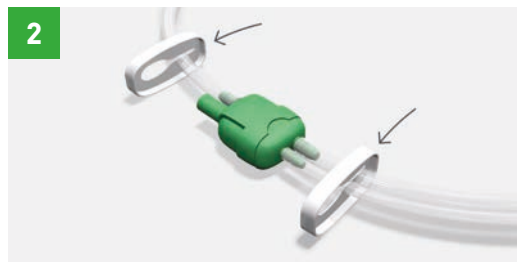

2 Deslice las abrazaderas del tubo cerca de los conectores verdes y empuje ambas sujeciones a través del tubo para asegurarse de que no haya fugas de líquido al desconectarlo.



3 Libere el tubo en la parte trasera de la bomba. Presione con fuerza las lengüetas de plástico laterales y tire mientras se balancea suavemente para desconectar el contenedor. Conecte el nuevo contenedor. Debe esperar que el contenedor se ajuste firmemente, esto es necesario para mantener un sellado efectivo.

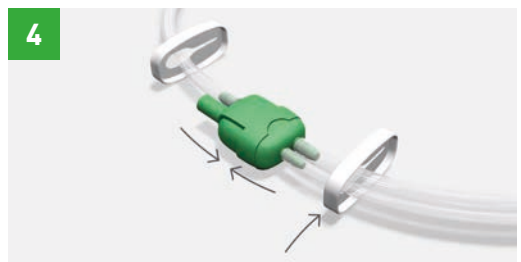

4 Recupere los dos conectores verdes, suelte la sujeción del tubo del apósito y reinicie la bomba presionando el botón verde de inicio, suéltelo después de dos (2) segundos. Vigile que la presión negativa esté activa, el apósito debe estar contraído y firme al tacto.

Cambiar las baterías

Debe cambiar las dos (2) pilas si hay una alarma de batería baja, o después de 7 días. Sólo use pilas de litio AA 1,5V GP15LF.

Para cambiar las pilas, realice los siguientes pasos:

- Si la bomba aún está activa, deténgala presionando el botón verde de inicio, y suéltelo después de dos (2) segundos
- Abra el compartimento de las pilas deslizando la tapa
- Retire las pilas
- Inserte pilas nuevas, asegurándose de que el terminal positivo (marcado +) y el terminal negativo (marcado -) de cada pila coincida con la etiqueta +/- del compartimento de las pilas
- Cierre la tapa del compartimento de la batería
- Reinicie la bomba presionando el botón verde de arranque, suéltelo después de dos (2) segundos. Asegúrese de que la presión negativa está activa, el apósito debe estar contraído y firme al tacto.



Limpiar el dispositivo

La limpieza ocasional de la bomba puede realizarse con un paño húmedo o con un detergente no abrasivo. No ponga la bomba bajo el agua corriente.



Visite la página web de Avance Solo para toda la información sobre el producto, testimonios, casos clínicos y videos y guías de aplicación.



¿Qué significan las señales de Avance® Solo?

El dispositivo utiliza varias señales para alertarle si la acción funciona o si necesita adoptar medidas. Por favor, asegúrese de que es capaz de oír y entender las diversas señales.

Alarmas y solución de problemas

Descripción de la pantalla sonora y visual



La luz indicadora de FUGA parpadea una vez por segundo.

La bomba da la alarma repetidamente con un pitido y luego hace una pausa.



La luz indicadora de BLOQUEO parpadea una vez por segundo.

La bomba da la alarma repetidamente con un pitido y luego se detiene.



La luz indicadora de BATERÍA BAJA parpadea una vez cada cinco (5) segundos.

Cuando quedan menos de 4 horas de batería, avisa de BATERÍA BAJA.

La luz indicadora parpadea una vez por segundo y la bomba avisa repetidamente con un pitido.



Todas las luces indicadoras parpadean al mismo tiempo, una vez por segundo, y la bomba avisa repetidamente con un pitido.

Nota: La bomba emitirá un sonido pulsante regular que escuchará mientras el sistema esté encendido. Esto es completamente normal y una confirmación de que el sistema está funcionando correctamente.

Posibles causas	Cómo solucionar el problema
Se ha detectado una fuga de aire.	<p>Para corregir una fuga: Presione alrededor del borde del apósito y las tiras para mejorar el contacto con la piel. Compruebe que el contenedor está conectado a la bomba, que el tubo del contenedor está conectado al contenedor y que el tubo del apósito está conectado al tubo del contenedor. Presione el botón verde de inicio para reiniciar la bomba. Si la fuga no se resuelve, la bomba volverá a emitir una alarma por la fuga y luego pausará la terapia. Si esto sucede y no se resuelve, por favor, póngase en contacto con su profesional de la salud.</p>
El contenedor está lleno o hay una obstrucción en los tubos.	<p>Para corregir un bloqueo: Asegurarse de que el tubo no esté doblado o torcido. Si el contenedor está lleno, cámbielo de acuerdo con las instrucciones de la página 8 de este documento, o del manual de usuario (incluido en el paquete del producto) en la sección 7.3. Presione el botón verde de arranque para reiniciar la bomba. Si no se resuelve la obstrucción, la bomba volverá a emitir una alarma por la obstrucción y luego detendrá la terapia. Si esto sucede, póngase en contacto con su profesional de la salud.</p>
Las pilas están casi agotadas.	<p>Para cambiar las pilas: Cambie las pilas según las instrucciones de la página 9 de este documento, o en el manual del usuario (incluido en el paquete del producto) en la sección 7.4. Utilice únicamente el tipo y el modelo de baterías de litio especificados para este producto por Mölnlycke. Pulse el botón de arranque verde para reiniciar la bomba.</p>
Alarma de FALLO INTERNO y la bomba no puede ser puesta en marcha.	<p>Contacte con un profesional sanitario o con Mölnlycke</p>

Proving it every day

En Mölnlycke ofrecemos soluciones innovadoras para el tratamiento de heridas y la prevención de úlceras por presión, además de soluciones quirúrgicas que aumentan la seguridad y eficiencia en quirófano. Soluciones para ayudar a alcanzar a conseguir mejores resultados y que están avaladas por una sólida evidencia clínica.

En todo lo que hacemos, nos guía un único propósito: ayudar a los profesionales sanitarios a dar lo mejor de sí mismos.

Y estamos comprometidos a demostrarlo cada día.

Referencias: 1. Apelqvist, J., Willy, C., Fagerdahl, A.M. et al. Negative Pressure Wound Therapy – overview, challenges and perspectives. J Wound Care 2017; 26: 3, Suppl 3, S1–S113. 2. Willy C, Agarwal A, Andersen CA, Santis GD, Gabriel A, Grauhan O, Guerra OM, Lipsky BA, Malas MB, Mathiesen LL, Singh DP, Reddy VS. Closed incision negative pressure therapy: international multidisciplinary consensus recommendations. Int Wound J 2016; doi: 10.1111/iwj.12612.

Más información en www.molnlycke.es

Mölnlycke Health Care, Calle Quintanavides 17, Edif. 3 - 4ª Planta. 28050 Las Tablas (Madrid) Tel: 914841320.
Mölnlycke® y Avance® son marcas y logotipos registrados globalmente por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care. © 2022 Mölnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados. ESWC0205

