


Melgisorb® Plus

Blød, højabsorberende alginatbandage

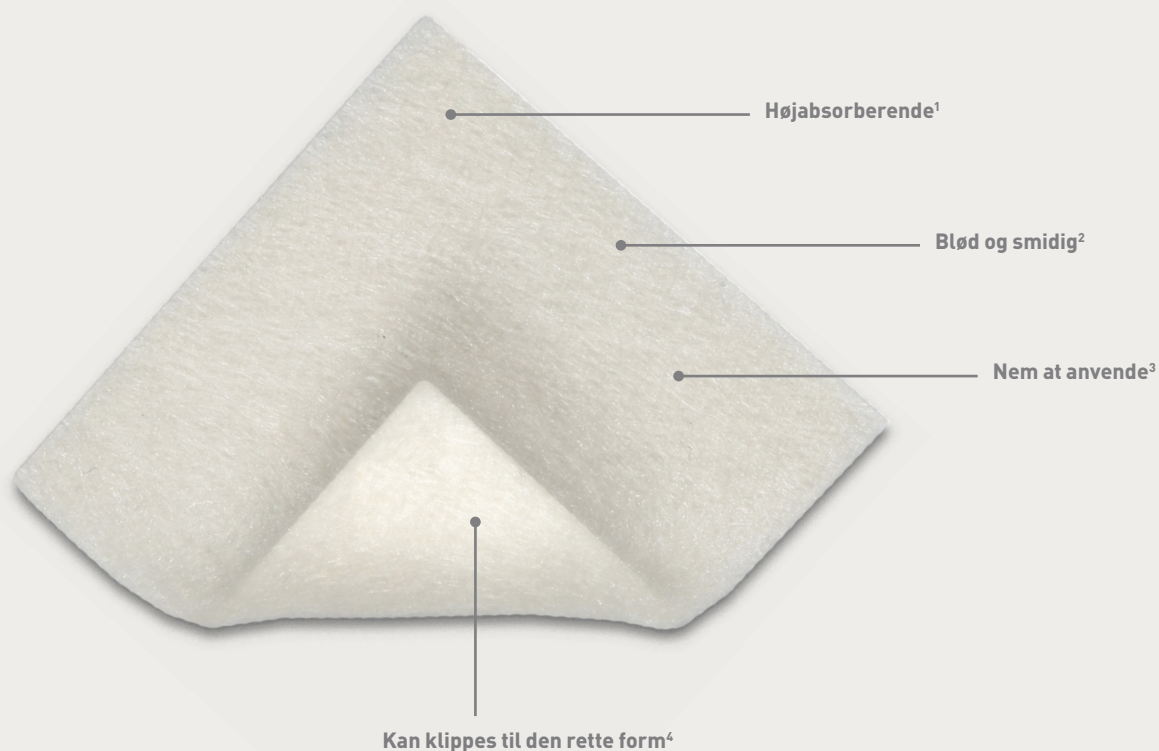


Melgisorb® Plus er en blød, højabsorberende, steril engangsbandage lavet af calcium sodium alginatfibre. Den omdannes til gel ved kontakt med ekssudat eller opløsninger indeholdende saltvand. Den klæber ikke til sårstedet ved fjernelse, og den absorberer og retinerer sårekssudat⁵.

Sådan anvendes Melgisorb® Plus




1. Vælg en størrelse Melgisorb® Plus, der er lidt større end såret. Åben pakningen ved at trække siderne fra hinanden.

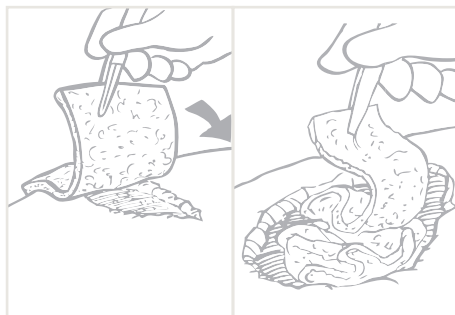

2. Tilfør den tørre Melgisorb Plus til den fugtige sårbund. **Ikke dybe sår:** Vælg den rette størrelse bandage, som kan dække hele såret.

Dybe sår og kaviteter: Klip den passende længde af kavitetsbandagen, og pak den løst i sårkaviteten.

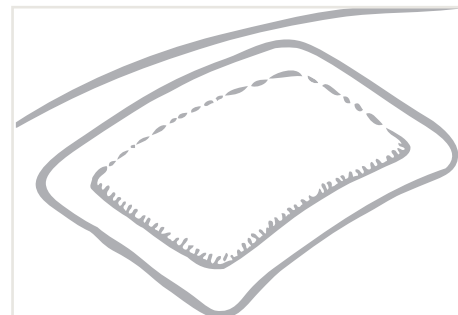

3. Afdæk og fastgør passende sekundær bandage såsom Mepilex® Border Flex.

Sådan virker Melgisorb Plus

Melgisorb® Plus består af fibre lavet af calcium sodium alginat og danner en gel ved kontakt med eksudat eller opløsninger indeholdende natriumioner (saltvand)¹. Den absorberer og retinerer sårekssudat og har en hæmostatisk evne. Melgisorb Plus er blød, smidig, kan klippes til den rette form og er nem at anvende³.

Fordele ved Melgisorb Plus

- Melgisorb Plus absorberer og retinerer sårekssudat og klæber ikke til den fugtige sårbund, når den er omdannet til gel⁶
- Melgisorb Plus er formbar og behagelig
- Den er blød, smidig og nem at anvende³

Anvendelsesområder

Melgisorb Plus er beregnet til en bred vifte af moderat og kraftigt væskende sår, både inficerede og ikke-inficerede, såsom tryksår, venøse og artielle sår, diabetiske sår, postoperative sår, dermale læsioner og andre eksterne sår påført af traumer.

Melgisorb Plus (sterilt pakket)

Varenr.	Str. cm	Stk./inderkrt.	Stk./trp.krt.
252000	5x5	10	100
252200	10x10	10	100
252500	10x20	10	100
253500	3x45	5	50



Referencer: 1. Mölnlycke; Data on file. [2011]. 2. Higgins L, Wasiak J, Spinks A, Cleland H. Split-thickness skin graft donor site management: a randomized controlled trial comparing polyurethane with calcium alginate dressings. *International Wound Journal* 2012; 9:126–131. 3. Mölnlycke; Data on file. [2021]. 4. Mölnlycke; Data on file. [2023]. 5. Mölnlycke; Data on file. [2019]. 6. Vanstraelen P. Comparison of calcium sodium alginate (KALTOSTAT) and porcine xenograft (E-Z DERM) in the healing of split-thickness skin graft donor sites. *Burns* 1992; 13(2), 145-148.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf. +45 80 886 810, info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke, Melgisorb og Mepilex varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2023 Mölnlycke Health Care. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC1672305


Mölnlycke®