

Mesalt®

Pansement absorbant imprégné
de chlorure de sodium



Pansement de viscose/polyester non-tissé


- Imprégné de chlorure de sodium.

Ne s'effiloche pas


- Peut être coupé sur mesure, au besoin.

- L'action détersive physiologique favorise la cicatrisation des plaies, même infectées.
- Absorbe l'exsudat, les bactéries et les débris de nécrose.
- Application facile, une seule opération.
- Crée un milieu hypertonique hostile aux microorganismes.
- Maintient l'équilibre bactérien.
- Conserve son intégrité, même saturé.


Mode d'emploi

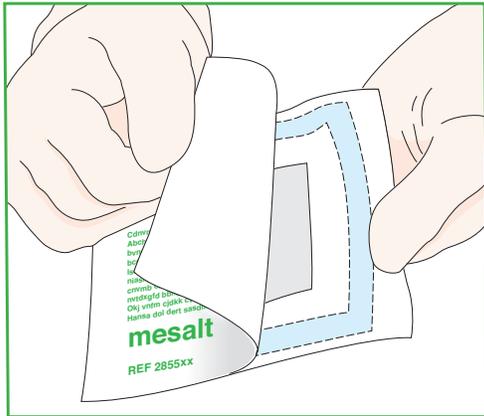

1. Nettoyer délicatement la plaie et son pourtour. NE PAS ÉPONGER L'EXCÈS D'HUMIDITÉ.

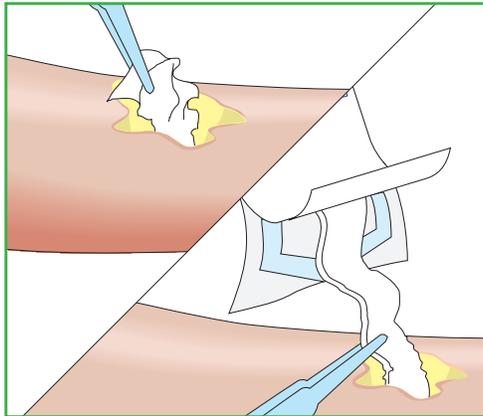

2. Ouvrir le pansement et le déposer dans la plaie sans déborder. Bourrer lâchement les plaies profondes.

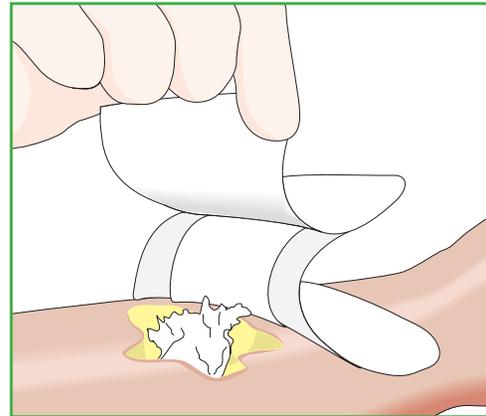

3. Couvrir d'un pansement Alldress® ou Ete® avec Mefix®. Changer Mesalt® à toutes les 24 heures ou plus souvent si la plaie coule beaucoup ou que le protocole le prescrit. Mesalt® est réservé à un usage à court terme maximal de 30 jours.

Mode d'action de Mesalt®

Mesalt® s'applique sec. Au contact de l'épanchement, les cristaux de chlorure de sodium se dissolvent pour créer un milieu hypertonique qui absorbe les liquides, résorbe l'œdème et entraîne les débris dans le pansement. Pendant ce processus de déterction physiologique, le milieu humide de la plaie est maintenu.

Avantages de Mesalt®

- Stimule la déterction physiologique de la plaie
- Maintient l'équilibre bactérien
- Facile d'emploi

Indications*

Mesalt® est indiqué pour le nettoyage de plaies infectées et non infectées modérément à fortement exsudatives, telles que les plaies superficielles ou cavitaires et les fistules.

Contre-indications*

Plaies sèches ou faiblement exsudatives.

N.B.

Au début du traitement avec Mesalt®, il se peut que l'écoulement soit plus copieux et la plaie plus profonde, car Mesalt® réduit l'œdème et enlève les débris de la plaie.

Sélection Mesalt®

No d'article	Format cm (pansement)	Pièces/boîte	Pièces/caisse
285580	5 x 5	30	240
285780	7,5 x 7,5	30	240
286080	10 x 10	30	180
Mesalt® Ribbon			
285280	2cm x 1m	10	80

Précautions*

- Mesalt® ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une allergie connue au pansement ou à ses composants.
- Mesalt® ne doit pas être utilisé sur les plaies sèches.
- Mesalt® ne doit pas entrer en contact direct avec un os ou tendon exposé.
- Les plaies infectées doivent faire d'une évaluation régulière et d'un traitement approprié.
- Ne pas réutiliser. S'il est réutilisé, le produit peut perdre de son efficacité et une contamination croisée peut survenir.
- Stérile. Ne pas utiliser si l'emballage intérieur est ouvert ou endommagé avant l'utilisation. Ne pas restériliser.

