



Sistema modular:

- Todos los productos del sistema de terapia de presión negativa son envasados en embalajes estériles.
- Avance Solo® y Avance® Solo Adapt son suministrados en un formato modular que permite al usuario seleccionarlos acorde a sus necesidades y minimizar así, el posible excedente de almacenaje o residuos.
- Proporciona una presión negativa de -125mmHg durante 14 días^{1,2}
- El Sistema CFM (Control Fluid Management) permite mantener la presión negativa constante transportando el exceso de fluido al contenedor^{3,4,5}.
- El apósito Avance® Solo con bordes y capa con Safetac® ha demostrado que minimiza el trauma en la herida y piel circundante durante la retirada⁶⁻⁹
- El exceso de fluido es transferido al contenedor distal de 50ml, reduciendo el riesgo de saturación del apósito⁴

Referencias: 1. Avance Solo CMM Data on file [ref 15]. 2. Avance Solo CMM Data on file [ref 17]. 3. Avance Solo CMM Data on file [ref 18]. 4. Avance Solo CMM Data on file [ref 10]. 5. Avance Solo CMM Data on file [ref 23]. 6. Van Overschelde P, et al. A randomised controlled trial comparing two wound dressings used after elective hip and knee arthroplasty. Poster presentation at the 5th Congress of WUWHS, Florence, Italy, 25-29 Sep, 2016. 7. Silverstein P, et al. An open, parallel, randomized, comparative, multicenter study to evaluate the cost-effectiveness, performance, tolerance, and safety of a silver-containing soft silicone foam dressing (intervention) vs silver sulfadiazine cream. J Burn Care Res. 2011;32(6):617-626. 8. Gee Kee EL, et al. Randomized controlled trial of three burns dressings for partial thickness burns in children. Burns. 2015;41(5):946-955. 9. David F, et al. A randomised, controlled, non-inferiority trial comparing the performance of a soft silicone-coated wound contact layer (Mepitel One) with a lipidocolloid wound contact layer (UrgoTul) in the treatment of acute wounds. International Wound Journal, 2017.



El apósito con borde Avance® Solo está disponible en una amplia gama de formas y tamaños. Escanee el código QR para encontrar los productos disponibles en su región. www.avance-solo.es

Gama Avance® Solo

Código	Descripción	Contenido	Caja dispensadora (Uds)	Caja transporte* (Uds)
Bomba, Contenedor y Apósito				
8881020	Kit de inicio Avance Solo 10 x 20 cm	Bomba + Contenedor 50ml con tubo + 4 x baterías AA + apósito 10 x 20cm + clip para cinturón	1 ud	2 uds
8881030	Kit de inicio Avance Solo 10 x 30 cm	Bomba + Contenedor 50ml con tubo + 4 x baterías AA + apósito 10 x 30cm + clip para cinturón	1 ud	2 uds
8881035	Kit de inicio Avance Solo 10 x 35 cm	Bomba + Contenedor 50ml con tubo + 4 x baterías AA + apósito 10 x 35cm + clip para cinturón	1 ud	2 uds
Bomba Avance Solo, Contenedor				
8880050	Avance Solo Bomba y Contenedor	Bomba + Contenedor 50ml con tubo + 4 x baterías AA + clip para cinturón	1 ud	2 uds
Apósitos con borde				
881020	Apósito con borde Avance Solo 10 x 20 cm	Apósito 10 x 20cm + 6 tiras de fijación secundarias	2 uds	4 uds
881030	Apósito con borde Avance Solo 10 x 30 cm	Apósito 10 x 30cm + 6 tiras de fijación secundarias	2 uds	4 uds
881035	Apósito con borde Avance Solo 10 x 35 cm	Apósito 10 x 35cm + 6 tiras de fijación secundarias	2 uds	4 uds
881515	Apósito con borde Avance Solo 15 x 15 cm	Apósito 15 x 15cm + 6 tiras de fijación secundarias	2 uds	4 uds
881520	Apósito con borde Avance Solo 15 x 20 cm	Apósito 15 x 20cm + 6 tiras de fijación secundarias	2 uds	4 uds
881530	Apósito con borde Avance Solo 15 x 30 cm	Apósito 15 x 30cm + 6 tiras de fijación secundarias	2 uds	4 uds
882020	Apósito con borde Avance Solo 20 x 20 cm	Apósito 20 x 20cm + 6 tiras de fijación secundarias	2 uds	4 uds
882525	Apósito con borde Avance Solo 25 x 25 cm	Apósito 25 x 25cm + 6 tiras de fijación secundarias	2 uds	4 uds
Otros sistemas consumibles				
880050	Contenedor Avance Solo 50ml	Contenedor 50ml con tubo	4 uds	8 uds
882000	Espuma Avance Solo 10 x 12 x 1,5cm	Espuma de poliuretano 10 x 12 x 1,5 cm	4 uds	8 uds

Gama Avance® Solo Adapt

Código	Descripción	Contenido	Caja dispensadora (Uds)	Caja transporte* (Uds)
9994152	Kit de inicio Avance Solo Adapt con contenedor, espuma, film y puerto de transferencia	Bomba + Contenedor 50ml con tubo + 4 x Baterías AA + Film adhesivo con silicona Safetac® + Espuma [8 x 10 x 3cm] + clip para el cinturón	1 ud	2 uds
994152	Espuma Avance Solo Adapt, Film y puerto de transferencia	Film adhesivo con silicona Safetac® + Espuma + Puerto de transferencia y tubos	5 uds	5 uds
994000	Film adhesivo Avance Solo Adapt 20 x 27cm	Film adhesivo con silicona Safetac®	5 uds	10 uds

*Pedido mínimo = una caja de transporte (TRP)

Para más información www.molnlycke.es

Mölnlycke Health Care, Calle Quintanavides 17, Edif. 3 - 4ª Planta - 28050 Las Tablas (Madrid). Tel: 914841320. Mölnlycke y Avance son marcas y logotipos registrados globalmente por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care © 2022 Mölnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados. ESWC0224



Avance® Solo y Avance® Solo Adapt

Gama de productos



Avance® Solo – incisiones quirúrgicas y heridas abiertas

Configuraciones disponibles:

1 Bomba, contenedor y apósito con borde

Los tres kits disponibles de la gama Avance Solo están diseñados para utilizar en quirófano en tratamientos de heridas incisionales. Estos kits contienen todo lo necesario para la aplicación e inicio de la terapia, evitando duplicidad de materiales y exceso de residuos. La bomba, el contenedor, el apósito y las tiras de fijación en un único embalaje y, además, 4 baterías AA.



2 Bomba Avance Solo y Contenedor


El embalaje de la Bomba Avance Solo incluye:

1. Bomba Avance Solo con motor y montaje
2. Pinza de plástico para el cinturón
3. Contenedor de 50 ml con tubo y conector hembra
4. 4 x baterías AA



3 Apósito con borde

Disponible en ocho tamaños distintos, suministrados en cajas que contienen dos apósitos estériles. Cada apósito tiene un tubo y puerto integrado con conector macho y viene con seis tiras de fijación secundarias de poliuretano y adhesivo acrílico.

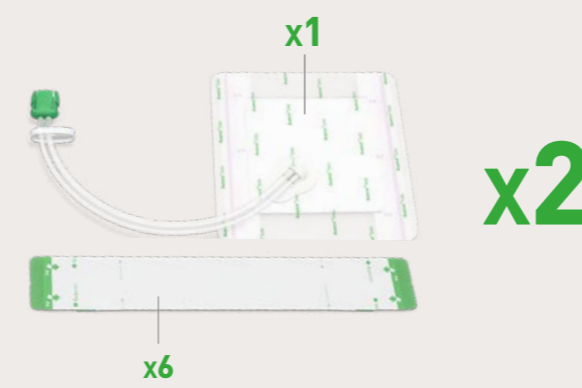

4 Contenedor Avance Solo y espuma

El contenedor y la espuma reticulada para rellenar la herida son suministrados en bolsas individuales estériles, cuatro unidades por cada kit. Los contenedores poseen tubos prefijados y conectores.




Avance® Solo Adapt - heridas abiertas

Configuraciones disponibles:

1 Avance Solo Adapt

La versión del sistema Avance Solo Adapt consiste en el mismo mecanismo de Avance Solo (misma bomba y contenedor), pero incluyendo, en lugar de apósito, una espuma de relleno de 3 cm de grosor y un film adhesivo de silicona Safetac®, que puede ser cortado para facilitar su aplicación en zonas difíciles. Además, el Kit de Avance Solo Adapt incluye un tubo con puerto, 4 baterías AA y clip para cinturón.

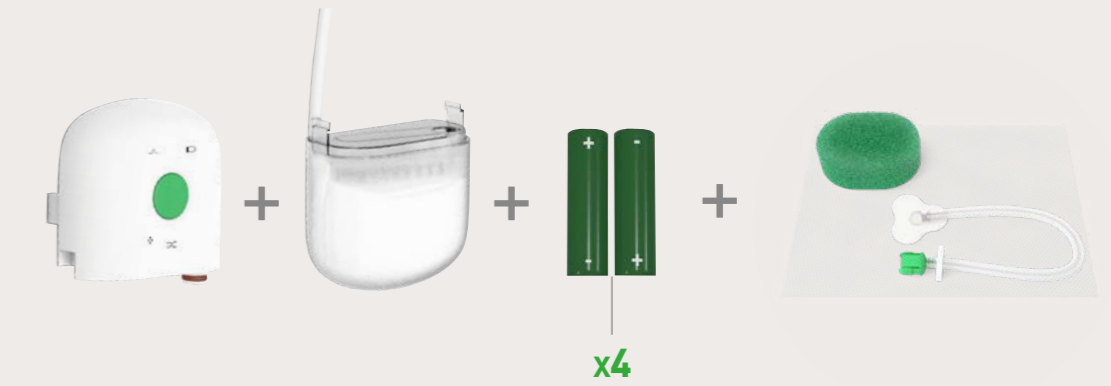

2 Apósito Avance Solo Adapt

Los apósitos son suministrados en una bolsa esterilizada que contiene un film adhesivo de silicona con capa de contacto Safetac®, una espuma Avance Solo Adapt, tubos y conectores.



3 Film Avance® Solo Adapt con silicona Safetac®

Los films adhesivos con silicona Safetac® son suministrados en sobres estériles.

