

Tryksårsforebyggelse med Mepilex® Border bandager



Mepilex® Border Sacrum
Mepilex® Border Heel
Mepilex® Border Flex


Mölnlycke®

Mölnlycke® - tryksårsforebyggende bandager

Rygleje

Bugleje

BAGHOVED

Mepilex® Border Flex
Oval 13x16 cm el. 10x10 cm

SKULDERBLAD

Mepilex® Border Flex
Oval 13x16 cm el. 10x10 cm

ALBUE



Mepilex® Border Flex
Oval 13x16 cm el. 10x10 cm

SACRUM

Mepilex® Border Sacrum
22x25 cm

HÆL

Mepilex® Border Heel
22x23 cm

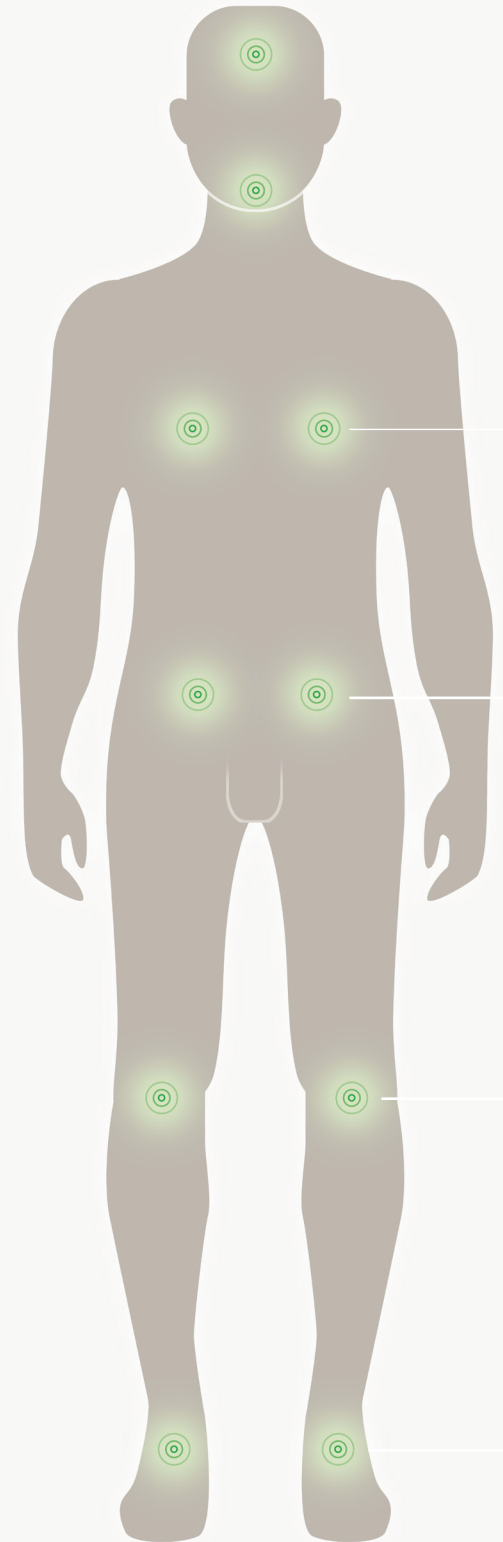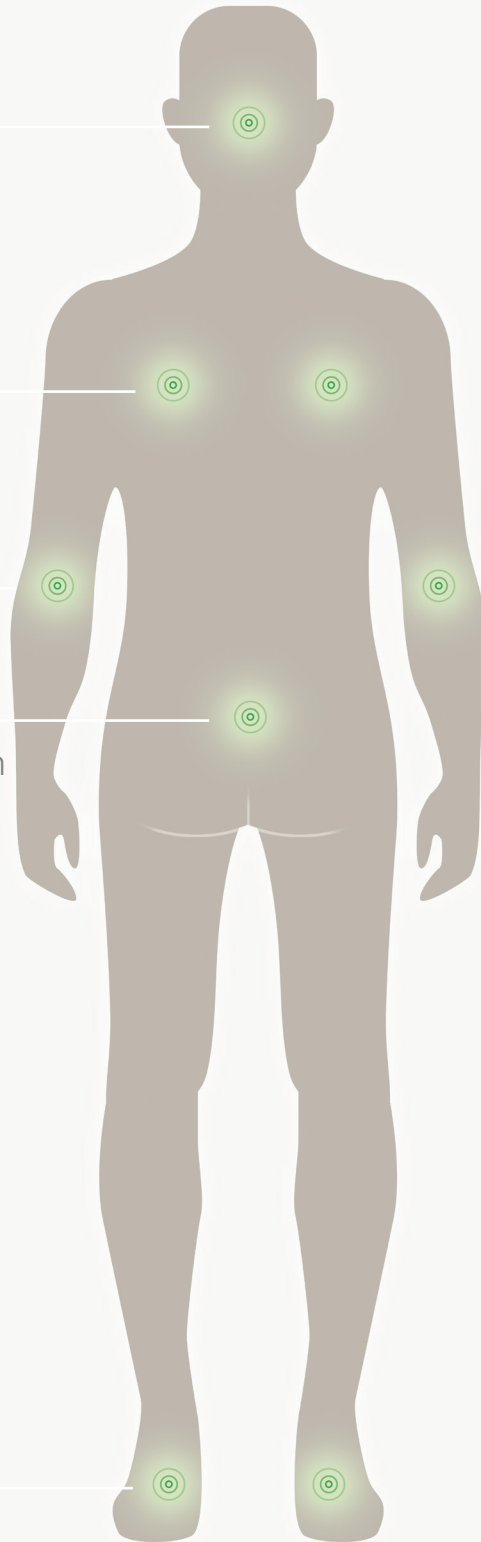

Til anvendelse på sacrum og hæl



Mepilex® Border Sacrum og Mepilex® Border Heel med proprietær Deep Defense® teknologi

PANDE og HAGE

Mepilex® Border Flex

Pande: Oval 13x16 cm el. 10x10 cm

Hage: Oval 7,8x10 xcm el. 7,5x7,5 cm

Til anvendelse på andre anatomiske områder



Mepilex® Border Flex og Mepilex® Border Flex Oval med proprietær Flex Teknologi

BRYST

Mepilex® Border Flex

Oval 15x19 cm el. 10x10 cm

HOFTEKAM

Mepilex® Border Flex

Oval 13x16 cm el. 10x10 cm

Mepilex Border Sacrum, sterilt enkeltpakket

Varenr.	Str. cm	Stk./inderkrt.	Stk./trp.krt.
282450	22 x 25	30	70
282050	16 x 20	40	50
282500	15 x 15	50	50

Mepilex Border Heel, sterilt enkeltpakket

Varenr.	Str. cm	Stk./inderkrt.	Stk./trp.krt.
282750	22 x 23	30	50

Mepilex Border Flex, sterilt enkeltpakket

Varenr.	Str. cm	Stk./inderkrt.	Stk./trp.krt.
595200	7,5 x 7,5	5	50
595300	10 x 10	5	50
595000	12,5 x 12,5	5	50
595400	15 x 15	5	50
595600	15 x 20	5	50
595800	10 x 20	10	60
595850	10 x 25	10	60
595900	10 x 30	10	40
583500 Oval	7,8 x 10	5	50
583300 Oval	13 x 16	5	35
583400 Oval	15 x 19	5	45

KNÆ

Mepilex® Border Flex


Oval 13x16 cm el. 10x10 cm

FODRYG

Mepilex® Border Flex


Oval 13x16 cm el. 10x10 cm

Mepilex® Border Sacrum og Mepilex® Border Heel med Deep Defense® teknologi

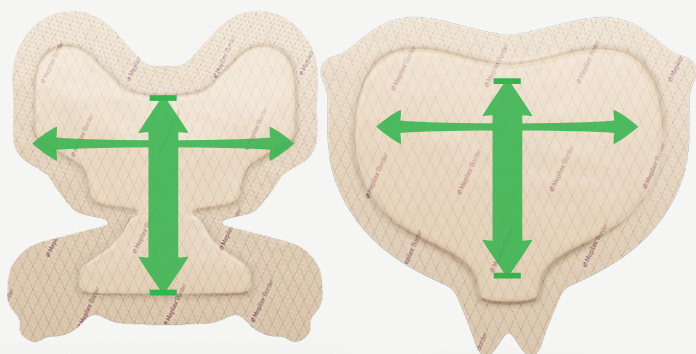


Deep Defense® teknologi giver **styrke** i den retning patienten glider og **fleksibilitet** i lateral retning^{1,2}

Mepilex® Border Flex med Flex Teknologi

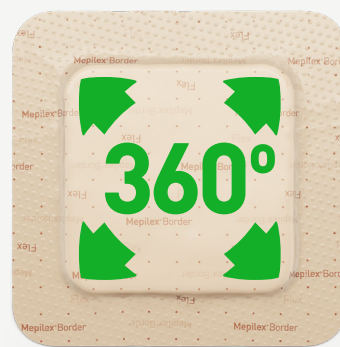


Flex Teknologi tillader bevægelse i alle retninger og forbedrer bandagens **formbarhed**, hvorved hudbelastningen reduceres^{3,4}

Vævsdeformation kan forekomme, når den sengeliggende patient glider ned i forbindelse med at hovedgærdet hæves^{1,2}.

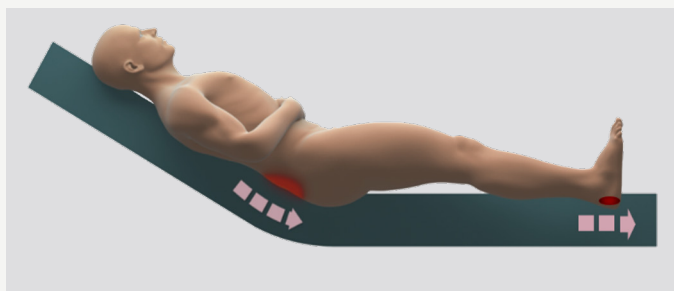

Mepilex® Border Sacrum og Mepilex® Border Heel med proprietær **Deep Defense® teknologi** kan beskytte mod disse specifikke skader. Teknologien sørger for beskyttelse i den retning patienten glider^{1,2}.

På andre anatomiske områder med risiko for tryksår - f.eks. i forbindelse med bugleje - påvirker de ydre kræfter på det bløde væv multi-direktionelt⁵.

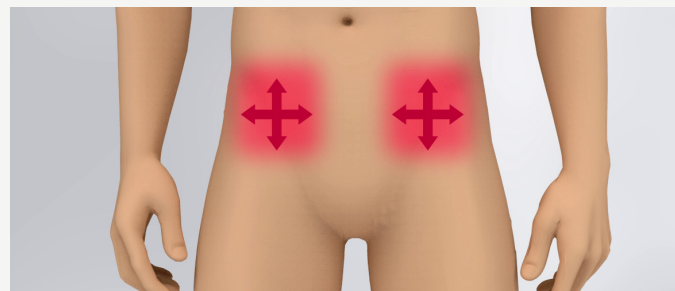

Nylig computermodellering har vist, at Mepilex® Border Flex bandage med proprietær **Flex Teknologi** kan reducere belastningen med op til **70-80%** i det bløde væv over hoftekammen, når den udsættes for multi-direktionelle kræfter⁶.

Referencer:

1. Levy A, Gefen A. Assessment of the biomechanical effects of prophylactic sacral dressings on tissue loads: A computational modeling analysis. *Ostomy Wound Management* 2017;63(10):48-55. 2. Levy, A., Frank B.M., Gefen, A. The biomechanical efficacy of dressings in preventing heel ulcers. *Journal of Tissue Viability* 2015. Available from: doi: 10.1016/j.jtv.2015.01.001. Epub 2015 Jan 19. 3. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex Product Manual – Conformability. 4. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – External data – FEM simulations. Report no. PD-529747. Data on file PD-528870. 5. Gefen, A. Expert opinion on pressure injury risks in the OR. August 2019. 6. FE simulation of PUP at the iliac crest in OR with Mepilex Border Flex Mölnlycke Health Care, Data on File 2019. 7. Davies, P. User evaluation of interface dressings for pressure ulcer prevention. Mölnlycke Health Care 2017. Data on file.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke, Mepilex og Safetac navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care Gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0482008


Mölnlycke®