

Painehaavojen ennaltaehkäisy Mepilex® Border -sidoksilla



Mepilex® Border Sacrum
Mepilex® Border Heel
Mepilex® Border Flex


Mölnlycke®

Mölnlycken® sidokset painehaavojen ennaltaehkäisyssä

Selkä-asento

Vatsa-asento

TAKARAIVO

Mepilex® Border Flex
10x10 cm tai ovaali 13x16 cm

LAPALUU

Mepilex® Border Flex
10x10 cm tai ovaali 13x16 cm

KYYNÄRPÄÄ



Mepilex® Border Flex
10x10 cm tai ovaali 13x16 cm

SACRUM

Mepilex® Border Sacrum
22x25 cm

KANTAPÄÄ

Mepilex® Border Heel
22x23 cm

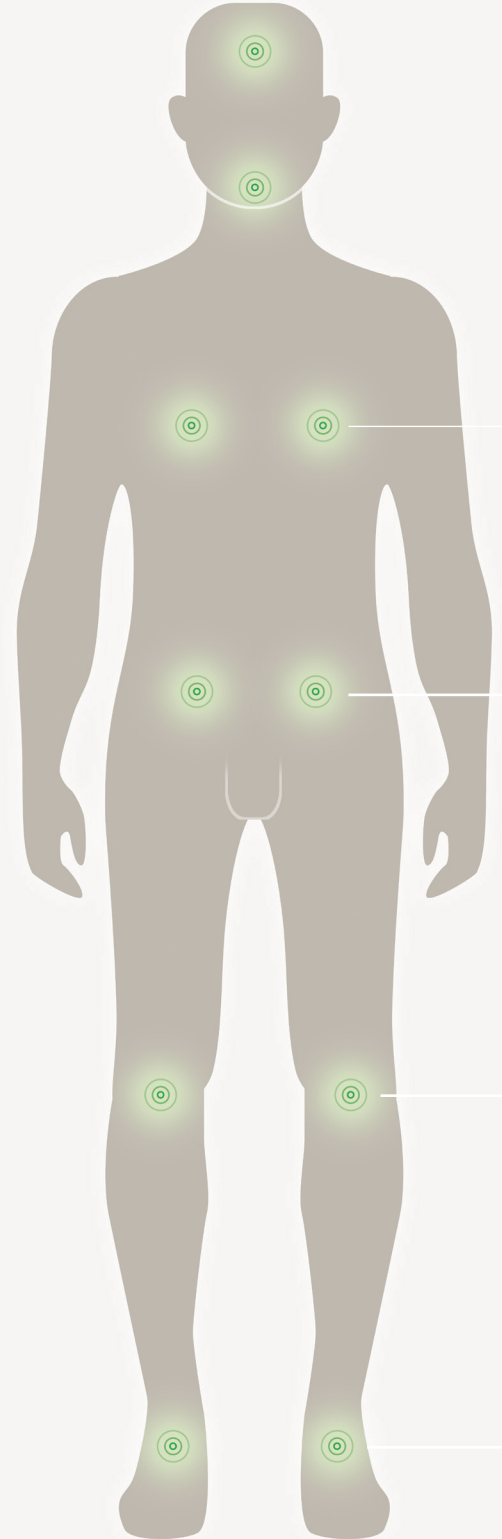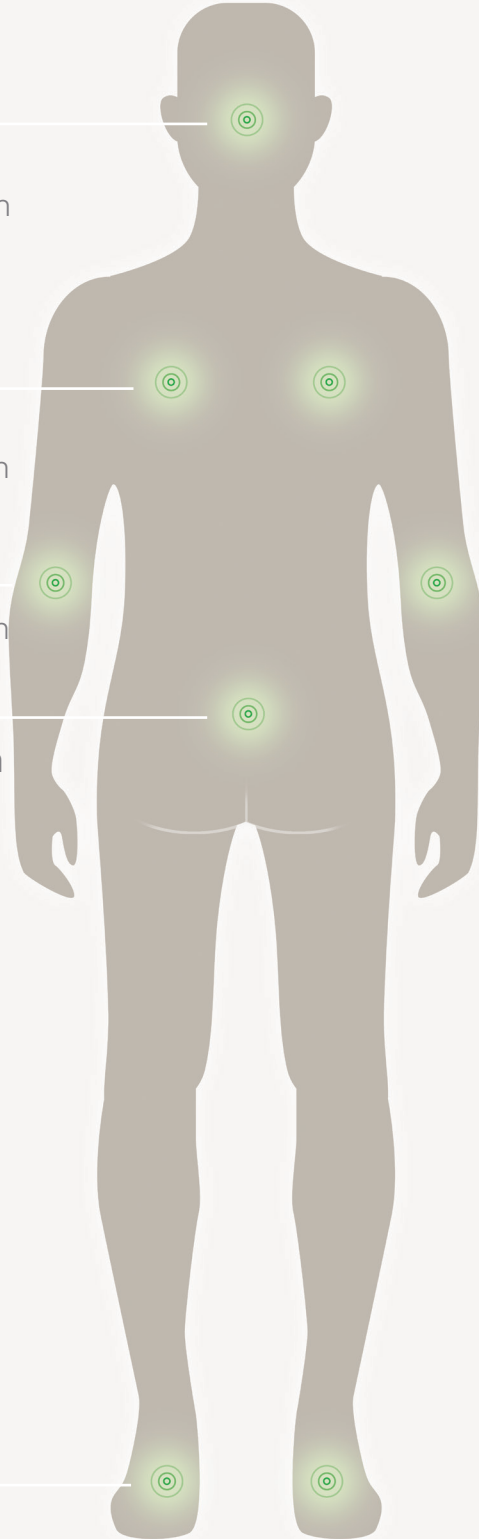

Sacrum ja kantapää



Mepilex® Border Sacrum ja Mepilex® Border Heel
Ainutlaatuisella Deep Defense® -teknologialla

OTSA JA LEUKA

Mepilex® Border Flex

Otsa: 10x10 cm tai ovaali 13x16 cm

Leuka: 7,5x7,5 cm tai 7,8x10 cm

Muihin anatomisiin alueisiin



Mepilex® Border Flex ja Mepilex® Border Flex Oval
Ainutlaatuisella Flex -teknologialla

RINTAKEHÄ

Mepilex® Border Flex

10x10 cm tai ovaali 15x19 cm

SUOLILUU

Mepilex® Border Flex

10x10 cm tai ovaali 13x16 cm

Mepilex Border Sacrum, steriilisti yksittäispakattu

Tuoteno.	Koko cm	Kpl/osastopakk.	Kpl/kuljetuspakk.
282450	22 x 25	5	30
282050	16 x 20	5	40
282500	15 x 15	5	50

Mepilex Border Heel, steriilisti yksittäispakattu

Tuoteno.	Koko cm	Kpl/osastopakk.	Kpl/kuljetuspakk.
282750	22 x 23	6	30

Mepilex Border Flex, steriilisti yksittäispakattu

Tuoteno.	Koko cm	Kpl/osastopakk.	Kpl/kuljetuspakk.
595200	7,5 x 7,5	5	50
595300	10 x 10	5	50
595000	12,5 x 12,5	5	50
595400	15 x 15	5	50
595600	15 x 20	5	50
595800	10 x 20	10	60
595850	10 x 25	10	60
595900	10 x 30	10	40
583500 Ovaali	7,8 x 10	5	50
583300 Ovaali	13 x 16	5	35
583400 Ovaali	15 x 19	5	45

POLVI

Mepilex® Border Flex


10x10 cm tai ovaali 13x16 cm

JALKAPÖYTÄ

Mepilex® Border Flex

10x10 cm tai ovaali 13x16 cm


Mepilex® Border Sacrum ja Mepilex® Border Heel Deep Defense® -teknologialla

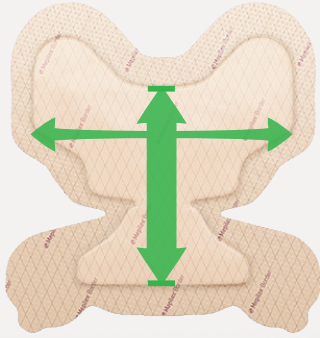

Deep Defense® -teknologia tarjoaa optimaalisen **vahvuuden** liukumissuunnassa ja **joustavuutta** sivusuunnassa potilaan suojelemiseksi kudosten muodonmuutoksilta^{1,2}


Deep Defense® -teknologia

Kun potilas makaa sängyssä ja sängyn pää on kohonnut, liukuminen yhteen suuntaan aiheuttaa kudoksen muodonmuutoksia^{1,2}.

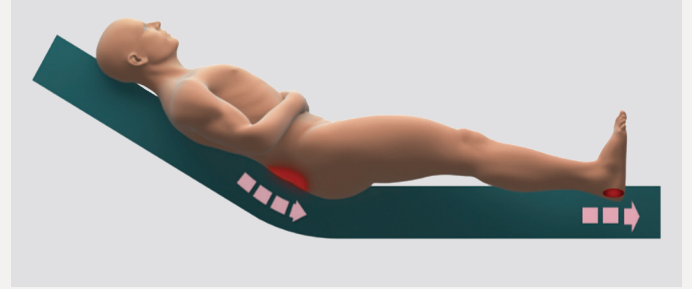

Alkuperäisellä **Deep Defense® -teknologialla** varustetut Mepilex® Border Sacrum ja Mepilex® Border Heel voivat auttaa suojaamaan ihoa kudonvaurioilta, koska ne tarjoavat lisäsuojausta potilaan liukumissuunnassa^{1,2}.


Mepilex® Border Flex Flex -teknologialla

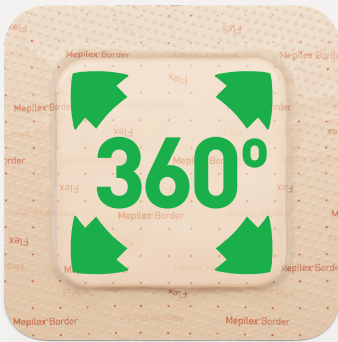

Flex -teknologia sallii liikkumisen kaikkiin suuntiin ja parantaa sidoksen **mukautuvuutta** vähentäen ihon rasitusta^{3,4}

Flex-teknologia

Muilla anatomisilla alueilla, joissa on painehaavariski, esim. vatsa-asennossa, pehmytkudoksiin vaikuttavat ulkoiset voimat ovat monisuuntaisia⁵.

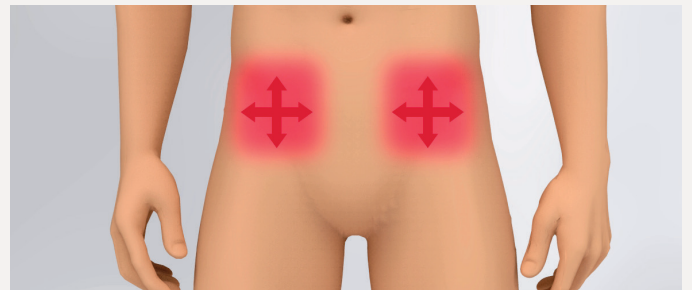

Viimeaikaiset tietokonemallinnukset ovat osoittaneet, että Mepilex® Border Flex -sidoksen **Flex -teknologialla** voi vähentää korkeaa rasitusta pehmytkudoksissa jopa **70-80%** suoliluun alueella, kun ne alistuvat monisuuntaisille voimille⁶.

References: 1. Levy A, Gefen A. Assessment of the biomechanical effects of prophylactic sacral dressings on tissue loads: A computational modeling analysis. *Ostomy Wound Management* 2017;63(10):48-55. 2. Levy, A., Frank B.M., Gefen, A. The biomechanical efficacy of dressings in preventing heel ulcers. *Journal of Tissue Viability* 2015. Available from: doi: 10.1016/j.jtv.2015.01.001. Epub 2015 Jan 19. 3. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex Product Manual – Conformability. 4. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – External data – FEM simulations. Report no. PD-529747. Data on file PD-528870. 5. Gefen, A. Expert opinion on pressure injury risks in the OR. August 2019. 6. FE simulation of PUP at the iliac crest in OR with Mepilex Border Flex Mölnlycke Health Care, Data on File 2019. 7. Davies, P. User evaluation of interface dressings for pressure ulcer prevention. Mölnlycke Health Care 2017. Data on file

Lisätietoa: www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, Valimoltie 21 00380 Helsinki. Puh. 0201 622 300. Mölnlycke ja Mepilex® nimet ja logot ovat yhdelle tai useammalle Mölnlycke Health Care Group -konsernin yritykselle globaalisti rekisteröityjä tavaramerkkejä. © 2020 Mölnlycke Health Care Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. FIWC1142010


Mölnlycke®