


Mölnlycke® Veress-naald


Laparoscopische oplossingen op maat

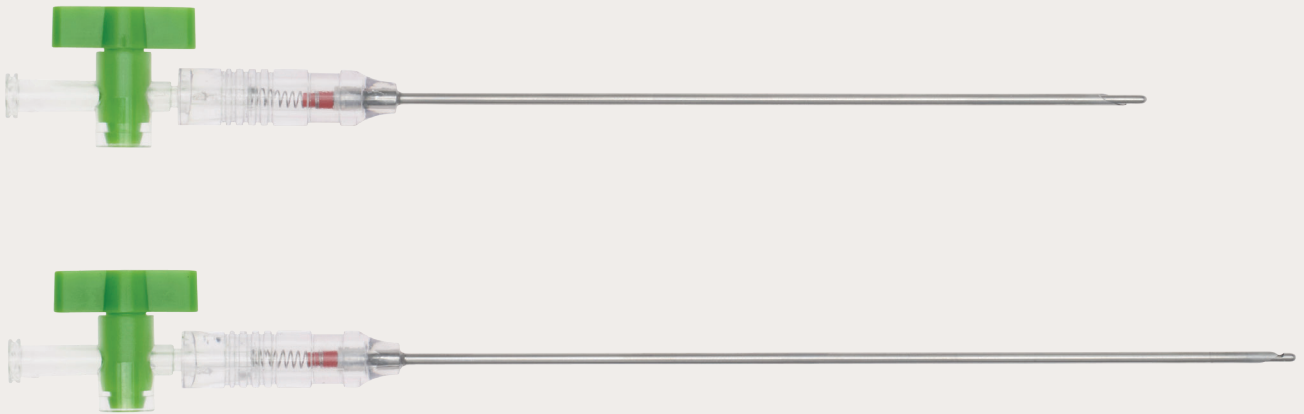

De Veress-naald wordt gebruikt om een pneumoperitoneum te creëren bij laparoscopische ingrepen.

- Scherpe afgeschuinde punt, zodat de buikwand gemakkelijk en veilig kan worden doorprikt
- Transparante handgreep met duidelijke rode visuele positie-indicator
- De stylet bevat een veer die een voelbare en hoorbare klik geeft om een juiste positionering te waarborgen
- Zodra de naald door het weefsel is gedrongen, wordt de schuine punt beschermd door een glad schild om elk risico op beschadiging van aangrenzende organen te voorkomen
- Roterende aansluitkraan met groot debiet en Luer-lock voor aansluiting op de insufflatieslang
- Verkrijgbaar in twee lengten - 120mm en 150mm
- Stompe punt met nauwkeurig geplaatst distaal insufflatieopening, voor veilige en gecontroleerde insufflatie

Verkrijgbaar als individueel verpakt steriel product en als onderdeel van Mölnlycke® procedure trays.

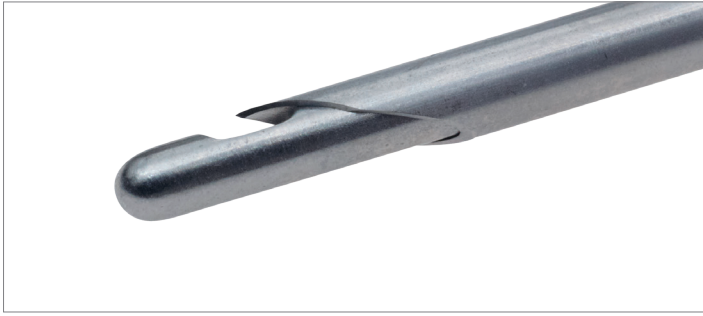

Punt Veress-naald



Handgreep Veress-naald

Ref. nr.	Beschrijving	Lengte	Stuks/disp.
899105	Veress-naald 120mm	120mm	25
899106	Veress-naald 150mm	150mm	25

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82
Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52
De Mölnlycke naam, logo en merknamen zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep.
© 2017 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. (NLSU00601709)

