



Mesorb®

ABSORBEREND SEMI-PERMEABEL NIET VERKLEVENDE VERBAND


Mesorb® is een zacht, sterk absorberend verband, in staat grote hoeveelheden wondvocht vast te houden. De semi-permeabiliteit belet dat doorsijpelend wondvocht kleren of beddengoed zou bevuilden.

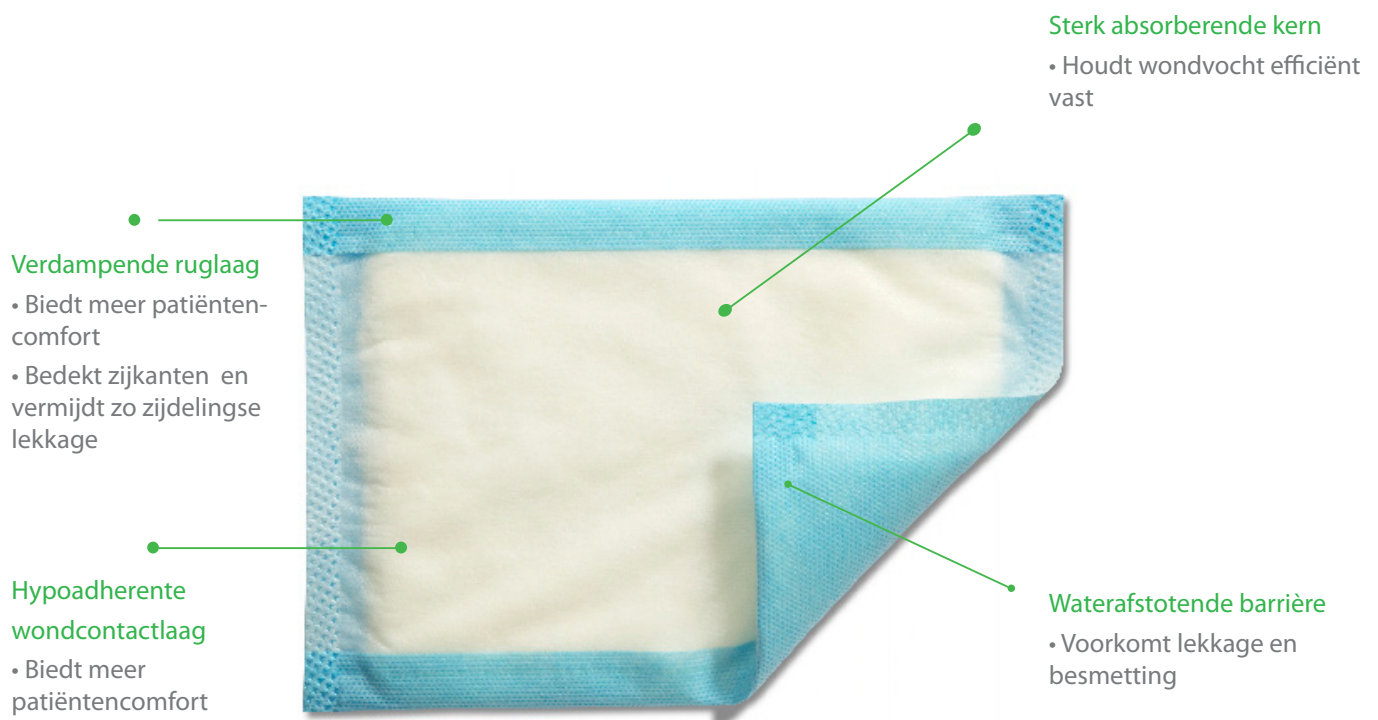


Gebruiksaanwijzing

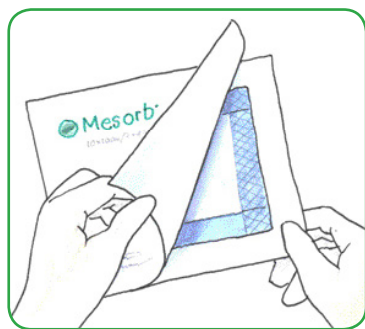

Haal het verband uit de verpakking.

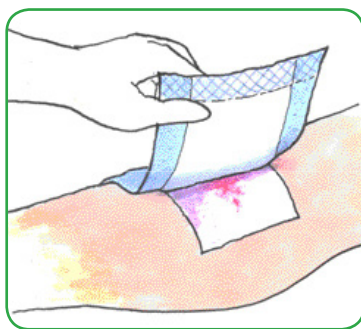

Breng Mesorb® aan op de wond of op het gekozen primair verband en zorg voor minstens 1 cm overlapping op de omringende huid.

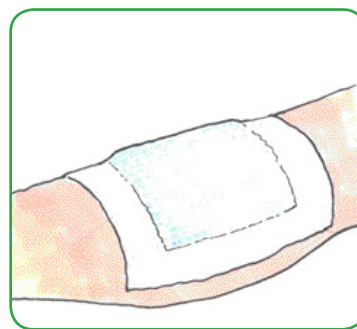

Fixeer Mesorb® met een geschikt fixatiemiddel (bv. Mefix®, Mepore® Film of Tubifast®).

Hoe Mesorb werkt

Via de wondcontactlaag en de verspreidingslaag wordt het wondvocht getransfereerd naar de sterk absorberende kern van Mesorb®. Deze kern dient tevens als een beschermend en verluchtend wondkussen. De waterafstotende ruglaag voorkomt dat de wond besmet zou geraken en beschermt kleren en beddengoed tegen lekkages. Doordat de ruglaag doorloopt tot aan de zijanten, wordt eveneens lekkage aan de zijanten vermeden.

Voordelen

- Hoge absorptiecapaciteit
- Beschermend wondkussen
- Luchtdoorlatend
- Kostenefficiënt
- De unieke barrière tegen doorsijpelend vocht vermindert het aantal verbandwisselingen en voorkomt vlekken op kleren en beddengoed

Voorzorgsmaatregelen

Alleen na positief advies van een wondzorgspecialist mag Mesorb® gebruikt worden bij geïnfecteerde wonden.

Toepassingen

- Vochtige tot zeer natte wonden
- Als primair verband (rechtstreeks op de wond)
- Als secundair verband in situaties waar een hoge absorptie vereist is, bv. in combinatie met Mepitel® of Mepilex® Transfer

Frequentie van verbandwissels

Mesorb® kan meerdere dagen op de wond blijven, afhankelijk van de wondconditie of zoals voorgeschreven.



Mesorb assortiment (Steriel verpakt)

Art. nr	Afm. (cm)	Z-indexnr.	Stuks/RET	Stuks/TRP
677001	10x13	15347699	50	400
677201	13x15	15347710	50	300
677401	10x23	15347702	50	300
677601	15x23	15347729	50	300
677701	23x25	15347737	30	120
677801	23x30	15347745	30	120

Meer informatie op www.molnlycke.nl

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, 4800 DD Breda, Nederland. Tel +31 (0)76 521 96 63 - Fax +31 (0)76 522 17 82

Mölnlycke Health Care en Mesorb® zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken en logo's van Mölnlycke Health Care.

© 2013 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden.